

# sonicaidTEAM

## - simplicity in fetal monitoring

**La gama Sonicaid Team ha sido diseñada para un control fetal más sencillo. Creada en colaboración con los principales especialistas en obstetricia, la unidad, de pequeño tamaño, peso ligero y fácil de usar, se puede transportar cómodamente dentro del hospital o hasta la clínica, la consulta del médico o incluso al hogar.**

- Compacto y ligero
- Las escalas del ritmo cardiaco fetal en gemelos permiten la diferenciación clara de los dos ritmos cardiacos y evitan las dificultades en la interpretación de los trazos desviados o coincidentes
- El sistema de menú, fácil de utilizar, permite el acceso rápido a las funciones importantes
- Su pantalla iluminada de gran tamaño permite una vigilancia segura de un solo vistazo
- Conexiones de módem y red para la gestión obstétrica a distancia e integrada
- Pantalla gráfica con el ritmo cardiaco fetal y trazos del toco continuamente actualizados
- La opción de análisis exclusiva Sonicaid 8002 garantiza una lectura coherente de los gráficos del ritmo cardiaco fetal por parte de todo el personal

### Opciones avanzadas del menú

- Memoria de gráficos de 6 horas con impresión rápida
- Se pueden añadir notas a los registros desde una biblioteca de notas clínicas disponible con sólo pulsar un botón
- Registro automático del movimiento fetal con el análisis Actograma

This product complies with the EN 60601-1, UL 2601-1 and CAN/CSA 22.2 NO. 601.1 safety standards. The CE mark indicates that it meets the essential requirements of European Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices. Huntleigh Healthcare operates a quality system certified to ISO 9001:2000, ISO 13485:2003, and the TickIT Guide Issue 5. Sonicaid, Architrace™, Adapt™ are registered trademarks of Huntleigh Healthcare. Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. For the USA the following applies: CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Copyright © 2005 Huntleigh Healthcare. All rights reserved.  
Manufactured by Huntleigh Healthcare, 35 Portmanmoor Road, Cardiff CF24 5HN, UK.



Part number: APL486/06/05/SP

Sonicaid and Medilog Products  
Huntleigh Healthcare  
Diagnostic Products Division  
35 Portmanmoor Road  
Cardiff CF24 5HN  
United Kingdom  
[www.sonicaidfetalcare.com](http://www.sonicaidfetalcare.com)

**sonicaid**™

# sonicaid™ TEAM


LA GAMA COMPLETA DE MONITORES FETALES SENCILLOS



sonicaid™

# sonicaidTEAM máxima flex

❶ Diseño compacto y un tamaño pequeño para una colocación más sencilla.

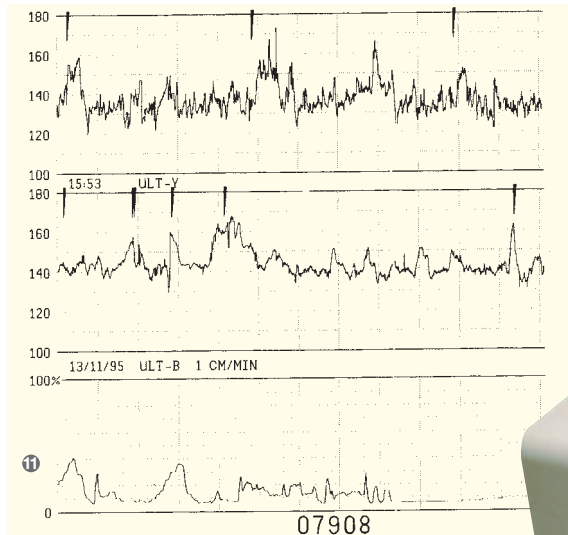

❷ Cambio rápido y sencillo del papel registrador.

❸ Las escalas del ritmo cardiaco fetal en gemelos permiten la diferenciación clara de los dos ritmos cardiacos y evitan las dificultades en la interpretación de los trazos desviados o coincidentes.

❹ Los modelos incluyen desde el control anteparto para feto único hasta el control intraparto para gemelos.

❺ La unidad telemétrica opcional Rimkus ofrece a la madre una mayor libertad.

❻ Transductores y lugar de conexión de los mismos con códigos de color para un reconocimiento y ensamblaje más sencillo.

❼ Se pueden añadir notas a los registros desde la biblioteca interna de notas clínicas.



# Flexibilidad y facilidad de uso

② Se puede conectar a los principales sistemas de gestión de obstetricia, incluido el sistema de archivo y revisión central SonicaidAxis.



④ Su funcionamiento mediante una sola tecla permite un fácil acceso a los elementos del menú.

⑥ Puesta a cero del toco con solo pulsar un botón.



⑥ Gráficos claros y fáciles de ver en pantalla.



## TEAM

Control anteparto para un solo feto  
Ideal para el control básico necesario durante el embarazo, Sonicaid Team ofrece la versatilidad funcional de la "gama Team". Marcador de eventos fetales y toco externo de ultrasonido.

## TEAM DUO

Control anteparto para gemelos  
Team Duo incorpora un canal adicional de ultrasonido que permite la evaluación precisa del ritmo cardiaco fetal de los gemelos.

## TEAM DM

Control anteparto a distancia  
Aprovechando al máximo la excelente portabilidad de la "gama Team", Team DM permite el control a distancia del ritmo cardiaco fetal desde fuera del centro hospitalario.

## TEAM IP

Control intraparto básico  
Control fetal durante la admisión, el parto y el alumbramiento. Team IP es un control básico ideal que ofrece un ECG fetal y maternal y la presión intrauterina, además de vigilancia para gemelos.

Con...

## Sonicaid8002 y SonicaidTrend

Los paquetes de análisis 8002 anteparto y Trend intraparto garantizan una lectura coherente de los gráficos del ritmo cardiaco fetal por parte de todo el personal, ofreciendo una mayor confianza en la lectura de gráficos difíciles e infrecuentes.



## SonicaidActogram

Registro automático de perfiles de actividad para la representación exacta e imparcial de los movimientos fetales.

## SonicaidRimkus

El sistema de telemetría Rimkus permite el control ambulatorio de la actividad cardiaca fetal y uterina para ofrecer una total libertad de movimiento a pesar de la vigilancia continua. La unidad receptora sirve también como cargador de baterías, garantizando que el transmisor, de peso muy ligero, esté siempre listo para su uso.

